

医療用品 (04) 整形用品  
高度管理医療機器 陰圧創傷治療システム JMDN 20395000

## 「InfoV.A.C.治療システム」の構成品 (V.A.C.キャニスター)

### 再使用禁止

#### 【警告】

1. InfoV.A.C.治療システムは、ケーシーアイ株式会社が規定したトレーニングを受けた者が使用すること。また、手術設備を有し、大出血等の緊急時の措置・対応を行う体制が整った医療機関での使用に限る。
2. 以下の患者は特に出血に留意し、慎重に対応すること。[出血や組織損傷の恐れがある。]  
・出血する恐れのある患者。  
・抗凝固薬又は血小板凝集抑制薬等を投与されている患者。  
・適用部位に止血薬を使用している患者。
3. 適用部位に明らかな臨床的感染(骨髄炎を含む。)を有する患者には、感染症状を軽快させてから使用すること。創傷の感染が疑われる場合は、抗菌薬の投与による全身・局所管理を行い慎重に対応すること。[感染が悪化する恐れがある。]
4. 閉塞性動脈硬化症(ASO)や末梢動脈疾患(PAD)などの虚血性疾患に起因する創傷を有する患者には、慎重使用すること。[内因性の血行不良が存在し、外科的デブリードマンを実施して創面の新鮮化を図った場合でも、臨床的な有効性、安全性が確立されていないため。]
5. 急性熱傷患者には、慎重使用すること。[本品の有効性、安全性が確立されていないため。]

#### 【禁忌・禁止】

1. 適応対象  
・悪性腫瘍がある創傷。  
・臓器と交通している瘻孔、及び未検査の瘻孔がある創傷。  
・陰圧を付加することによって瘻孔が難治化する可能性のある創傷。(髄液瘻や消化管瘻、肺瘻など。)  
・痂皮を伴う壊死組織を除去していない創傷。
2. 適応対象(患者)  
・アクリル系粘着剤に過敏症を有する患者。
3. 使用方法に関する禁忌・禁止  
・再使用禁止  
・再滅菌禁止
4. 併用医療機器に関する禁忌・禁止  
・InfoV.A.C.治療システム及び V.A.C.治療システムの構成品以外の医療機器〔意図した機能を保てなくなるため。〕  
・除細動器〔電流伝達や患者蘇生を妨げる可能性があるため。〕

#### 【形状、構造及び原理等】

##### 1. 構成

InfoV.A.C.治療システム(以下、「本システム」と略)は、InfoV.A.C.型陰圧維持管理装置(以下、「本体」と略)、フォーム、V.A.C.ドレープ、連結チューブ、V.A.C.キャニスター、付属品及びアクセサリから構成されている。  
本添付文書は、V.A.C.キャニスター及びアクセサリ(キャップ)に適用される。

##### 2. 原理

本システムは、創傷部に適応したフォームを V.A.C.ドレープで覆うことにより形成した閉鎖環境内に、連結チューブを介して創傷部に連続的又は間欠的に陰圧を伝達し、滲出液等を吸引するシステムである。本体の陰圧を発生させるための陰圧ポンプ及び圧力センサはソフトウェアにより制御されており、連結チューブと

V.A.C.キャニスターチューブを介して創傷部の陰圧をモニタリングし管理する。また、本システムの陰圧作動モードとして、局所的に管理された陰圧を連続的に伝達するモードと間欠的に伝達するモードがある。

#### 3. 形状、構造

##### 1) V.A.C.キャニスター

- ①InfoV.A.C.500 キャニスター ゲル化剤入り
- ②InfoV.A.C.500 キャニスター ゲル化剤なし
- ③InfoV.A.C.1000 キャニスター
- ④ActiV.A.C.キャニスター



③④はゲル化剤入りのみ

(寸法：縦×横×高さ)

- ①②：約 10.9×19.0×5.4cm  
容量：500ml
- ③：約 10.9×19.0×9.42cm  
容量：1000ml
- ④：約 6.94×15.25×6.76cm  
容量：300ml

##### 2) アクセサリ(キャップ)



(寸法：外形)  
約 12mm

#### 【使用目的又は効果】

適応疾患に対して、管理された陰圧を付加し、創の保護、肉芽形成の促進、滲出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治癒の促進を目的とする。

##### 適応疾患：

既存治療に奏効しない、或いは奏効しないと考えられる難治性創傷

#### 【使用方法等】

詳細は組み合わせて使用する医療機器の各添付文書及び取扱説明書を参照すること。

本システムは、本体とその構成品(別取扱品)を組み合わせて使用する。V.A.C.キャニスターはその構成品の一つである。本体及びその他の構成品は以下のとおりである。

V.A.C.キャニスター以外の本システムで使用する製品

<本体>

・InfoV.A.C.型陰圧維持管理装置

<その他の構成品>

・V.A.C.グラニューフォームキット製品(V.A.C.グラニュー


- フォーム、V.A.C.ドレープ、連結チューブ、定規)
- ・ V.A.C.ホワイトフォームキット製品(V.A.C.ホワイトフォーム、V.A.C.ドレープ、連結チューブ、定規)
- ・ V.A.C.ホワイトフォーム
- ・ V.A.C.ドレープ
- ・ 連結チューブ
- ＜付属品＞
- ・ Y字連結管

### 1. V.A.C.キャニスターの取り扱いについて

V.A.C.キャニスターは 1 週間に 1 回以上交換する。また、滲出液の量に応じて適宜交換する。

### 2. V.A.C.キャニスターを含めた InfoV.A.C.治療システムの使用方法

- 1) フォーム(V.A.C.グラニューフォーム及び/又は V.A.C.ホワイトフォーム)を創傷部全体が覆われるように置く。
- 2) V.A.C.ドレープでフォームを覆うようにかぶせ、貼り付ける。[フォームの交換は原則として 48 時間ごとに実施する。]
- 3) フォームと重複している V.A.C.ドレープの中央部分に約 2.5 cm 径の穴を開ける。
- 4) 連結チューブのドレッシングコネクタを貼り付ける。
- 5) 本体に V.A.C.キャニスターを装着し、連結チューブと接続する。
  - ① 滅菌包装より V.A.C.キャニスターを取り出し、本体にしっかりと装着する。  
滲出液の量は、V.A.C.キャニスター側面にある目盛でおおよその量を計測することができる。
  - ② 連結チューブと V.A.C.キャニスターのチューブを接続する。それぞれのチューブのクランプが開いた状態であることを確認する。クランプは患者側から離れた箇所を設置する。(下図)

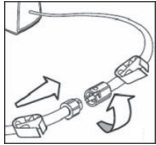

- 6) 本体の主電源を入れ、陰圧運転モード(最初は連続)を設定する。
- 7) 原則として最初の 48 時間は、125mmHg の陰圧を連続モードで適用する。その後、125mmHg の陰圧を 5 分オン、2 分オフの間欠モードを適用するか、又は連続モードを継続する。
- 8) 治療開始後、リークがないことを確認する。動作不良を感じた場合は、連結チューブと V.A.C.ドレープの閉鎖状態、チューブの接続、V.A.C.キャニスターの装着状態、及びクランプの開閉状態を確認する。患者移動の妨げにならないように、余分なチューブを安全な箇所に固定する。
- 9) リークが認められた場合は、リーク箇所に V.A.C.ドレープを追加して確実な閉鎖を行う。V.A.C.ドレープの透湿性を保持するため、同一箇所への貼付は 3 枚以下にする。
- 10) V.A.C.キャニスターの取り外しは、キャニスターリリースボタン(本体正面)を押してロックを解除してから持ち上げて取り出す。
- 11) フォーム、V.A.C.ドレープを交換あるいは除去する際には、周囲の健常皮膚、創傷部の新生血管、良性肉芽を損傷しないよう愛護的に除去する。フォーム除去時の疼痛が強い際には、生理食塩水等で湿らせてからゆっくりと除去する。フォームは適用した数と除去した数が同じであることを確認すること。創傷全体をよく観察し、フォームの切片はすべて取り除かれていることを確認する。
- 12) すべてのディスプレイ製品は、医療用廃棄物として廃棄する。

### 3. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 血液等の飛沫病原体の感染リスクを低減するために、すべての患者に対して各医療施設の規定に従って標準的感染予防

策を実施する。体液への接触が考えられる場合は、医療用手袋、マスク、ガウン、防護メガネ等を用いること。

- 2) 本システム全般及び患者に異常のないことを適宜監視すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 1) 小柄な患者、滲出液の多い患者、体格に対して相対的に大きい創傷を有する患者は、過度の体液喪失及び脱水のリスクがあるため、慎重に対応すること。
- 2) 脳血管障害、循環器系の合併症等を有する患者においては特に注意して慎重に対応すること。
- 3) 患者に、自律神経反射異常(交感神経系の刺激応答による突然の血圧や心拍数の急変)がみられた場合は感覚器への刺激を最小限にするために本治療の中止を検討すること。
- 4) 四肢の創傷などで、多量の滲出液が認められる患者に対して、V.A.C.ドレープを巻き付けて使用する方法(環状ドレープ法)は推奨しない。閉鎖状態を維持するために医師が必要と判断して環状ドレープ法を用いた際には、末梢動脈を適宜触知し、循環状態を評価すること。循環不全が疑われた場合は、治療を中断してフォームを除去し、当該使用の継続を再検討する。

#### 2. 重要な基本的注意

- 1) 心・肺、胸部食道術後の患者で、縦隔炎等の難治性の感染を有する創傷は、臨床的な感染症状が軽快し、出血等の危険がないと判断した場合のみ使用すること。使用する際には慎重に対応すること。
- 2) 出血する恐れのある患者については、以下のとおり慎重に対応すること。
  - ① 本システム使用直前に、露出血管や臓器の被覆処置を行った場合は、慎重に対応すること。
  - ② 低い陰圧 75mmHg から開始する。治療初期段階は頻回に観察し、患者の出血状況を確認する。
  - ③ 著しい出血が認められた場合(拍動性の出血又は大量の出血が起きた場合、チューブ及び V.A.C.キャニスター内に鮮血がみられた場合等)は、本体の電源を落とし、出血部位の確認及び止血措置をとること。フォーム除去による出血の悪化や再出血を防ぐために、止血を確認するまでフォームを除去しないこと。また、十分な止血が行われ、出血の恐れがなくなるまで本システムを再開してはならない。
  - ④ 出血部位の確認及び適切な止血処置を行えるよう、医師及び/又は看護師による監視体制を敷くこと。
  - ⑤ 抗凝固薬又は血小板凝集抑制薬等を投与されている患者は、PTINR 値：1.5～2.5 等の臨床検査値を参考に、これらの投与量及び出血の管理を行い、慎重に対応する。
- 3) 創傷の感染が疑われる場合、より密なモニタリング及び頻繁なドレッシング交換を行い慎重に対応すること。回復又は軽快するまでは、12～24 時間ごとのドレッシング交換を推奨する。また、感染の徴候、滲出液の状態、感染の悪化、他の合併症について頻繁にモニターすること。全身性感染の徴候又は創傷部における進行性の感染徴候が認められた場合は、本システムの中止を考慮する。
- 4) 本治療は、実質的な治療を 2 時間以上中断しないこと。2 時間以上中断する場合はフォームを除去し、再開する場合は、未開封の滅菌済パッケージから取り出した新しいドレッシングを使用する。

#### 3. 不具合・有害事象

本システムの使用に伴い、以下の不具合・有害事象が報告されている。

- ・ 死亡(出血等)
- ・ アレルギー反応
- ・ 出血
- ・ 浸軟
- ・ 組織障害/骨折
- ・ 外科的処置

- ・ 感染
- ・ 皮膚炎
- ・ フォームの置き忘れ
- ・ 瘻孔の形成
- ・ 皮膚損傷
- ・ 腫脹
- ・ 疼痛
- ・ 血腫、適応外使用(臓器露出)、治癒の遅滞、不快感、創傷の変色、損傷、挫傷、悪化、表皮剥離

#### 4. 高齢者への適用

高齢者は一般的に副作用があらわれやすいため、大量の滲出液による体液損失などに特に注意すること。

#### 5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

幼児、小児に対する臨床成績は蓄積されておらず、安全性は確立されていないため、慎重に対応すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

高温多湿の場所を避け、室温保存

##### 2. 有効期間

製品包装に記載

##### 3. 保管上の注意事項

- 1) 水のかからない場所に保管する。
- 2) 気圧・温度・湿度・風通し・日光に留意し、ほこり・塩分・イオン分などを含む空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- 3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。

#### 【取扱い上の注意】

- 1) 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- 2) 本システム使用前には当該添付文書及び取扱説明書を確認の上、使用すること。
- 3) 使用条件下であっても、頻繁に急激な温度変化を生じさせる使用はしないこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ケーシーアイ株式会社

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町 3 番 12 号

紀尾井町ビル

電話 0120-897-706

製造業者：

ケーシーアイ ユーエスエー インク(米国)

KCI USA, INC

